


KaVo QUATTROcare PLUS

Goed onderhoud loont.

De voordelige oplossing voor optimaal onderhoud en duurzaam waardebehoud.

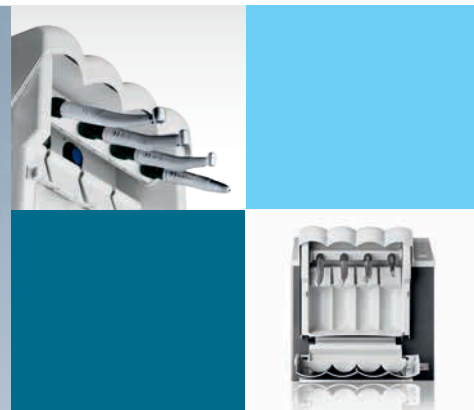

KaVo. Dental Excellence.

Viervoudig, perfect onderhoud. Snel en comfortabel.

Zeer eenvoudig in gebruik.

In de dagelijkse praktijk blijft weinig tijd over voor het onderhoud van uw hoogwaardige instrumenten. Zowel voor u als uw praktijkteam. Het is daarom des te belangrijker om op een betrouwbaar onderhoudssysteem te kunnen vertrouwen, dat nuttief en snel kan worden bediend. Het is een kwestie van instrumenten plaatsen, het voorpaneel sluiten, en starten. Vier in één keer. In één handomdraai klaar.

Vier instrumenten binnen één minuut.

Volledig automatisch met één druk op de knop, het is heel eenvoudig. KaVo QUATTROcare PLUS biedt een hoge mate aan snelheid en gebruiksgemak. De KaVo QUATTROcare PLUS zal u overtuigen dankzij de zeer eenvoudige bediening. U plaatst tot vier instrumenten gelijktijdig op de vier onderhoudskoppelingen, u sluit het voorpaneel en start het onderhoudsprogramma. De complete onderhoudsprocedure voor vier instrumenten duurt slechts één minuut. Vervolgens is de QUATTROcare PLUS direct weer ebruiksklaar voor de volgende onderhoudscyclus.

Zo eenvoudig is het.

Optimale onderhoudskwaliteit voor vier instrumenten binnen één minuut.

De procedure met de KaVo QUATTROcare PLUS:

- 1 Plaats de instrumenten. Voor het plaatsen van de instrumenten zijn standaard een MULTiflex onderhoudskoppeling alsook drie INTRAmatic koppelingen beschikbaar.
- 2 Sluit het voorpaneel. U kunt nu starten.
- 3 Druk de startknop in. De volautomatische interne reiniging en onderhoud van vier instrumenten duurt slechts één minuut.
- 4 Klaar. U kunt de instrumenten nu verwijderen.



**SLECHTS 1
MIN!**

Bediening en programmaverloop – Hoogtepunten en voordelen voor u:

- Geen bedieningsfouten dankzij de eenvoudige en veilige bediening
- Veilig onderhoud door de automatische onderhoudscyclus
- Snelle beschikbaarheid van de instrumenten dankzij de korte cyclusduur van één minuut

KaVo QUATTROcare PLUS:
eenvoudig – snel – comfortabel.



Optimaal onderhoud.

Het verschil zit in de details.

Door het opschuimen van het reinigingsmiddel van de KaVo QUATTROcare PLUS onderhoudsspray worden de anorganische resten binnen in het instrument losgemaakt en met perslucht weggeblazen. Zo worden de omstandigheden voor een optimaal onderhoud gecreëerd.

Echter, om alle eiwitten veilig uit de instrumenten te verwijderen, is een intensieve reiniging met KaVo CLEAN- en DRYspray noodzakelijk, alvorens de instrumenten te smeren. De snelheid van de KaVo QUATTROcare PLUS ontlast niet alleen de raktijkwerkzaamheden, maar biedt ook een perfect onderhoud. e levensduur van uw instrumenten profiteert ervan.

De automatisch afgemeten dosering garandeert dat elk instrument voorzien wordt van de hoeveelheid olie die nodig is voor het type instrument. Zo wordt onnodig verbruik van onderhoudsolie vermeden en worden de optimale prestaties van de instrumenten verzekerd. Daarnaast is de KaVo QUATTROcare PLUS universeel toepasbaar. Dit betekent dat u zowel uw hoogwaardige KaVo instrumenten met KaVo QUATTROcare PLUS kunt onderhouden, alsook instrumenten van alle gangbare fabrikanten.

Consequent efficiënt in onderhoud.


Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van productkwaliteit, maar ook van regelmatig en grondig onderhoud. KaVo heeft met het KaVo QUATTROcare onderhoudssysteem een wereldwijde maatstaf in de efficiëntie van instrument-onderhoud gezet. Het innovatieve KaVo QUATTROcare PLUSonderhoudssysteem is ongeëvenaard grondig, zuinig en eenvoudig te bedienen. Perfect voor al uw instrumenten die dagelijks in de praktijk worden gebruikt.

KaVo QUATTROcare PLUS is standaard met de innovatieve zuiveringsfunctie uitgerust. Hierdoor worden de aandrijvings- en spraykanalen aanvullend van perslucht voorzien en doorgeblazen, zodat overtollige resterende olieresten worden verwijderd en de KaVo instrumenten met de grootste zorg worden onderhouden.

Geïntegreerd spantang- onderhoudsprogramma.

Het één keer per week reinigen en onderhouden van de spantangen van uw instrumenten waarborgen daardoor de houdbaarheid, en zorgen voor een lange levensduur.

1. Plaats de spantang-onderhoudsadapter op de MULTiflex oppeling.
2. Plaats de spantang op de onderhoudsadapter.
3. Selecteer het spantang programma.

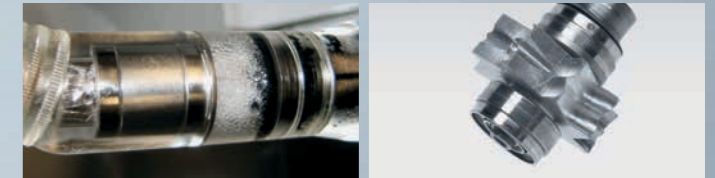

Het KaVo QUATTROcare effect. Krachtige verspreiding van de KaVo QUATTROcare PLUS onderhoudsspray binnen in het instrument lost organische resten op en verwijdert deze.

Efficiëntie in de praktijk. KaVo SUPERtorque LUX 650 B, onderhouden met het KaVo QUATTROcare-onderhoudssysteem. Zeven jaar dagelijks gebruik in de praktijk zonder uitval of vervanging van de turbine. Altijd optimaal onderhouden – altijd gebruiksklaar.



UITMUNTEND.

Onderhoud en efficiëntie – Hoogtepunten en voordelen voor u:

- Optimaal onderhoud door KaVo QUATTROcare PLUS onderhoudsspray
- Hoge efficiëntie door perfecte afstemming op dagelijkse praktijkvereisten

KaVo QUATTROcare PLUS:
optimaal onderhoud – uiterst efficiënt.



Voordelig in aanschaf. Spaarzaam in gebruik.



De voordelen liggen voor de hand.

U hecht waarde aan instrumenten met de allerbeste kwaliteit. KaVo QUATTROcare PLUS zorgt ervoor dat uw instrumenten niets verliezen aan precisie en waarde. Want alleen met perfect onderhoud en grondig hygiënisch gereinigde instrumenten kunt u langdurig kosten besparen en perfecte resultaten bereiken.

De automatisch uitgemeten dosering en het instrument detectie-systeem van de KaVo QUATTROcare PLUS garanderen de exacte dosering van de KaVo QUATTROcare PLUS onderhoudsspray. Overmatig verbruik en daarmee onnodige kosten worden voorkomen.

Voordelig onderhoud - Hoogtepunten en voordelen voor u:

- Onderhoudscyclus van slechts één minuut voor vier instrumenten
- Programmagestuurde, automatische onderhoudscyclus
- Optimaal olieonderhoud door automatisch uitgemeten dosering
- Eenvoudige bediening voorkomt onderhoudsfouten
- Uitblazen van de aandrijvings- en spraykanalen door de reinigingsfunctie
- Voorkomt vrijkomen van restolie na het onderhoud
- Basisuitrusting met vier onderhoudskoppelingen (1 x MULTiflex / 3 x INTRAmatic)
- Universeel toepasbaar (adapter leverbaar voor alle gangbare fabrikanten)
- Modern en ergonomisch design

KaVo QUATTROcare PLUS:
eenvoudig - universeel - zuinig.

REINIGING
+
ONDERHOUD
=



Technische gegevens

Afmetingen:

Breedte	35 cm
Diepte	28 cm
Hoogte	38 cm

Technische gegevens:

Gewicht	10 kg
Netspanning	100 – 240 V
Netfrequentie	50 – 60 Hz
Vermogensopname	ca. 24 W
Persluchtdruk	4 – 6 bar
Persluchtverbruik	ca. 50 NI/min

Installatievoorwaarden:

- Goede ventilatie van de ruimte
- Geen direct zonlicht



Accessoires

Product	Mat.-nr.	Product	Mat.-nr.
Onderhoudskoppeling INTRAMatic	1.009.6143	Onderhoudskoppeling Yoshida turbines met licht	1.000.7403
Onderhoudskoppeling MULTIflex	1.009.6142	Onderhoudskoppeling Yoshida turbines zonder licht	1.000.7585
Onderhoudskoppeling kopjes	0.411.7941	Onderhoudskoppeling Midwest Low Speed	1.000.8459
Onderhoudskoppeling COMFORTdrive	1.005.1707	Onderhoudskoppeling NSK turbines	1.000.8786
Onderhoudsadapter SIRONA TE instrumenten	1.000.1003	Onderhoudskoppeling Osada turbines	1.000.8858
Onderhoudskoppeling SIRONA T1 turbines	1.000.7156	Onderhoudskoppeling Borden 2-gats	1.002.1217
Onderhoudskoppeling BIEN-AIR	1.001.7860	QUATTROcare Plus Spray (verpakking met 6 bussen)	1.005.4525
Onderhoudskoppeling W&H	1.001.7888		



KaVo. Dental Excellence.