


# Un bon entretien porte ses fruits.

La solution avantageuse pour assurer  
un parfait entretien et une grande  
longévité à vos instruments.

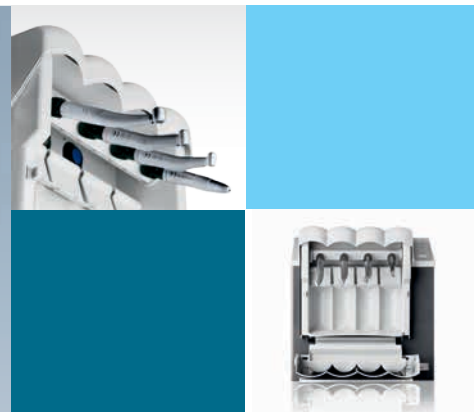

KaVo. Dental Excellence.

# Un entretien parfait multiplié par quatre. Rapide et confortable.

## Tellement simple à utiliser.

Dans la pratique quotidienne, le temps nécessaire à l'entretien de vos instruments KaVo haut de gamme fait souvent défaut aussi bien à vous qu'à votre équipe. Il est donc d'autant plus important de pouvoir compter sur un système d'entretien fiable pouvant se commander de manière simple et rapide. Mettez les instruments en place. Fermez le capot frontal. Lancez le programme. Quatre d'un coup. Prêts en un tour de main.

## Quatre instruments en une minute.

Une simple pression suffit. Entièrement automatisé. KaVo QUATTROcare PLUS offre un maximum de rapidité et de convivialité. La manipulation du KaVo QUATTROcare PLUS est éblouissante de simplicité. Placez jusqu'à quatre instruments simultanément sur les quatre embouts d'entretien, fermez le capot frontal et lancez le programme choisi. Le processus d'entretien ne dure en tout et pour tout qu'une minute pour quatre instruments. Le QUATTROcare PLUS est ensuite immédiatement prêt pour le prochain cycle de nettoyage.

## Il n'y a pas plus simple.

Une qualité d'entretien optimale pour quatre instruments :

Les étapes de travail avec KaVo QUATTROcare PLUS.

- 1 Mettez en place les instruments. Pour fixer les instruments, vous disposez d'un embout d'entretien MULTIflex et de trois embouts INTRAmatic.
- 2 Fermez le capot frontal. Et la procédure peut commencer.
- 3 Appuyez sur le bouton de démarrage. Le nettoyage interne et l'entretien entièrement automatisés de quatre instruments maximum ne durent pas plus d'une minute.
- 4 C'est terminé ! Vous pouvez retirer les instruments.



1 MIN.  
SEULEMENT !

## Manipulation et déroulement du programme – vos atouts et avantages :

- Pas d'erreurs de manipulation grâce à une commande simple et sûre
- Fiabilité de l'entretien grâce au déroulement automatique du programme
- Disponibilité immédiate des instruments grâce au cycle de courte durée (1 minute)

**KaVo QUATTROcare PLUS :**  
simple – rapide – confortable.



# Un entretien impeccable.

## La différence visible dans le détail.

L'effet moussant du composant nettoyant du spray d'entretien KaVo QUATTROcare plus détache les résidus organiques à l'intérieur des instruments et ceux-ci sont ensuite évacués à l'aide d'air comprimé, fournissant ainsi la condition préalable pour un graissage optimal.

Pour qu'une élimination efficace des protéines à l'intérieur des instruments soit également garantie, il est nécessaire de procéder au préalable à un nettoyage intensif avec le spray KaVo CLEAN and DRY. La rapidité du KaVo QUATTROcare PLUS soulage non seulement votre cabinet, mais vous offre également la sécurité d'un entretien parfait. La récompense : une plus grande longévité de vos instruments.

Le dispositif de dosage automatique à emplacements individuels garantit l'utilisation de la quantité d'huile adaptée à chaque instrument en fonction du modèle. Ceci permet d'éviter une consommation excessive d'huile d'entretien tout en assurant un fonctionnement optimal des instruments. KaVo QUATTROcare PLUS est un système universel. En d'autres mots : vous pouvez nettoyer aussi bien vos instruments KaVo de haute qualité avec KaVo QUATTROcare PLUS que les instruments de tous les fabricants courants.

## Efficacité en terme d'entretien.

La longévité d'un instrument ne dépend pas seulement de la qualité du produit, mais aussi d'un entretien adapté. En lançant le système d'entretien KaVo QUATTROcare, KaVo a posé de nouveaux jalons en matière d'entretien des instruments. Le système d'entretien KaVo QUATTROcare PLUS innovant agit en profondeur et se distingue en outre par sa simplicité d'utilisation et sa rentabilité. Parfait pour tous les instruments utilisés au quotidien dans votre cabinet.

KaVo QUATTROcare PLUS est équipé de série de la fonction de purge novatrice. Les conduites du moteur et de spray sont alors alimentés en air comprimé, l'air insufflé éliminant sur son passage d'éventuels résidus d'huile et assurant ainsi un entretien des instruments KaVo jusque dans le moindre recoin.

## Programme d'entretien de pinces de serrage intégré.

Le nettoyage et l'entretien hebdomadaire des pinces de serrage de vos instruments préservent leur force de maintien, leur sécurité de fonctionnement et assurent une grande longévité.

1. Enclencher l'adaptateur d'entretien pour pince de serrage sur l'embout MULTIflex
2. Mettre en place la pince de serrage sur l'adaptateur d'entretien
3. Appuyer sur la touche du programme « Pinces de serrage »



*L'effet KaVo QUATTROcare. L'expansion puissante du spray d'entretien KaVo QUATTROcare plus à l'intérieur des instruments détache et élimine les résidus organiques.*

*Efficacité pour le cabinet. KaVo SUPERtorque LUX 650 B, entretenue avec le système d'entretien KaVo QUATTROcare. Sept ans d'utilisation quotidienne au cabinet sans panne ou remplacement de pièces. Toujours parfaitement entretenue -Toujours opérationnelle.*



**EXCELLENT.**

## Entretien et efficacité – vos atouts et avantages :

- Entretien optimal grâce au spray d'entretien QUATTROcare plus
- Haut niveau d'efficacité grâce à l'adaptation parfaite aux exigences quotidiennes d'un cabinet dentaire

**KaVo QUATTROcare PLUS :**  
entretien optimal – efficacité maximale.



# Avantageux à l'achat. Economique en terme de consommation.



## Les avantages sont évidents.

Vous souhaitez disposer d'instruments haut de gamme. KaVo QUATTROcare PLUS garantit à vos instruments précision et longévité. Car seuls des instruments parfaitement entretenus et préparés de manière hygiénique permettent d'obtenir des résultats parfaits tout en économisant de l'argent.


Le dispositif de dosage à emplacements individuels et la détection d'occupation des emplacements d'entretien du KaVo QUATTROcare PLUS sont les garants d'un dosage exact du spray d'entretien KaVo QUATTROcare plus. Une consommation excessive et des dépenses inutiles sont ainsi évitées.

## Un entretien économique – vos atouts et avantages :

- Un cycle d'entretien d'une minute seulement pour quatre instruments
- Procédure d'entretien avec cycle à programmation automatique
- Lubrification optimale grâce au dispositif de dosage automatique à emplacements individuels
- Manipulation simple évitant les erreurs d'entretien
- Purge des conduites d'engrenage et de spray grâce à la fonction de purge
- Aucune fuite de résidu d'huile après l'entretien
- Équipement de base avec 4 embouts d'entretien (1 x MULTiflex / 3 x INTRAmatic)
- Utilisable universellement (adaptateurs pour tous les produits courants disponibles)
- Design moderne et ergonomique

**KaVo QUATTROcare PLUS :**  
simple – universel – économe.

NETTOYAGE  
+  
ENTRETIEN  
=

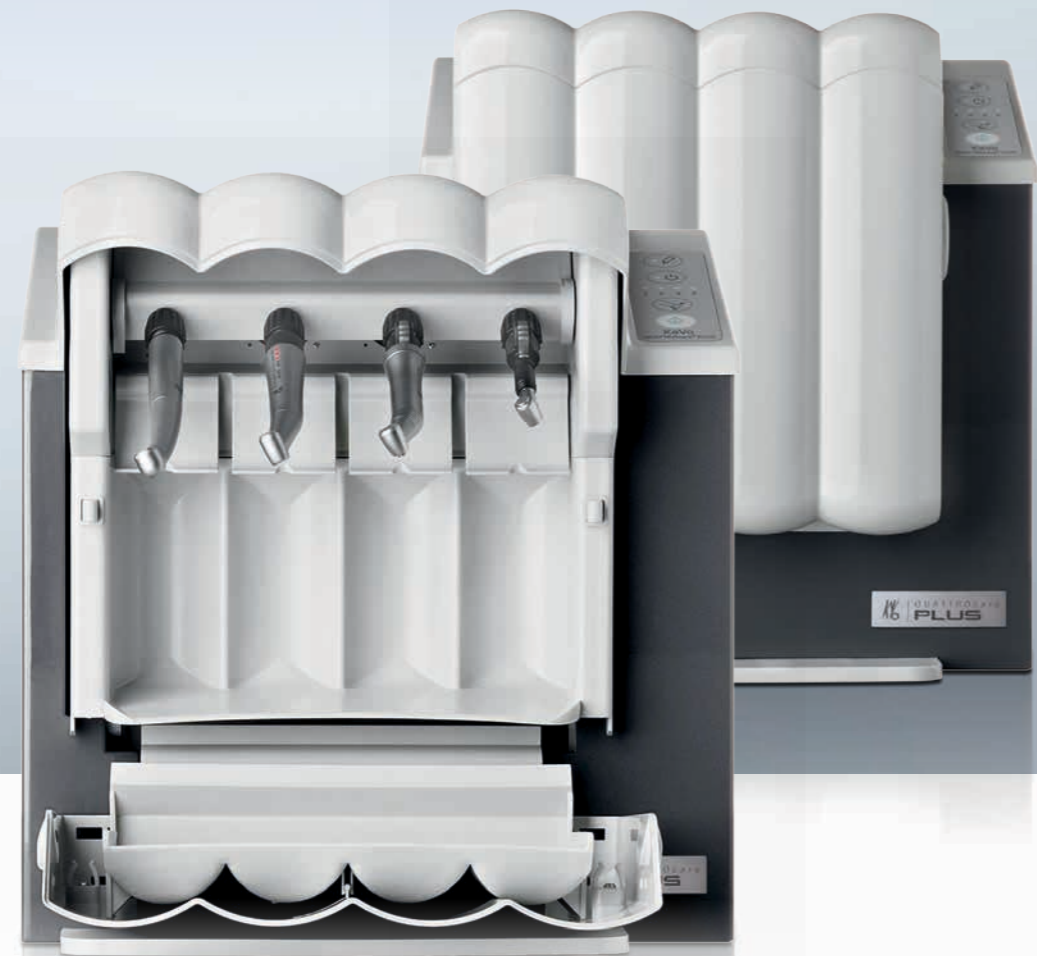

# Caractéristiques techniques

## Dimensions :


Largeur	35 cm
Profondeur	28 cm
Hauteur	38 cm

## Détails techniques :

Poids	10 kg
Tension du secteur	100 à 240 V
Fréquence du secteur	50 à 60 Hz
Puissance absorbée	env. 24 W
Raccordement d'air comprimé	4 à 6 bars
Consommation en air comprimé	env. 50 NI/min

## Recommandations :

- Bonne aération de la pièce
- Pas d'exposition directe aux rayons du soleil

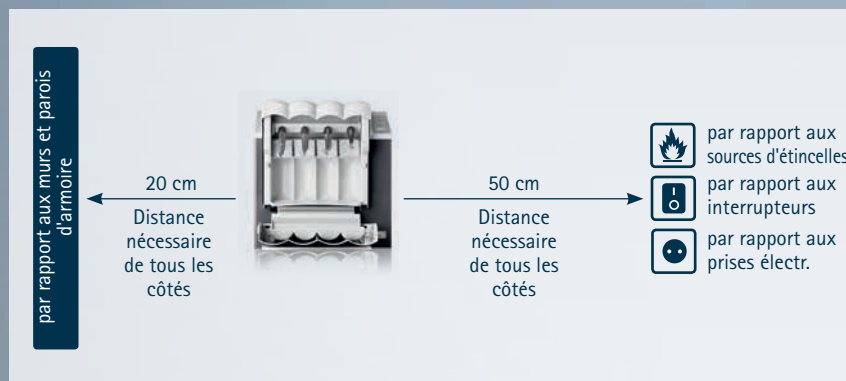

# Accessoires

Produit	N° d'art.	Produit	N° d'art.
Embout d'entretien INTRAMatic	1.009.6143	Embout d'entretien pour turbines YOSHIDA avec lumière	1.000.7403
Embout d'entretien MULTIflex	1.009.6142	Embout d'entretien pour turbines YOSHIDA sans lumière	1.000.7585
Embout d'entretien pour têtes	0.411.7941	Embout d'entretien pour MIDWEST Low Speed	1.000.8459
Embout d'entretien COMFORTdrive	1.005.1707	Embout d'entretien pour turbines NSK	1.000.8786
Adaptateur d'entretien pour instruments SIRONA TE	1.000.1003	Embout d'entretien pour turbines OSADA	1.000.8858
Embout d'entretien pour turbines SIRONA T1	1.000.7156	Embout d'entretien pour turbines Borden 2 trous	1.002.1217
Embout d'entretien BIEN-AIR	1.001.7860	Spray QUATTROcare Plus (pack de 6 doses)	1.005.4525
Embout d'entretien W&H	1.001.7888		



Dispositif médical classe I/CE0124/Dekra certification GmbH  
 Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.  
 Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : [www.kavo.fr](http://www.kavo.fr)  
 Produit non remboursé par les organismes d'Assurance Maladie  
 Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes



KaVo. Dental Excellence.